

# 3M 8822

Khẩu trang N95 có van thở

*Hướng dẫn sử dụng*

**QUAN TRỌNG:** *Giữ các Hướng dẫn sử dụng này để tham khảo*



## ⚠️ WARNING

Mặt nạ phòng độc này giúp bảo vệ chống lại các hạt nhất định. Sử dụng sai có thể dẫn đến bệnh tật hoặc tử vong. Để sử dụng đúng cách, hãy xem người giám sát hoặc Hướng dẫn sử dụng trên gói hoặc

### QUAN TRỌNG

Trước khi sử dụng, người đeo phải đọc và hiểu các Hướng dẫn sử dụng này. Giữ các hướng dẫn này để tham khảo. Xem thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất.

### Sử dụng cho

Các hạt được tạo ra bằng cơ học và nhiệt ở nồng độ gấp mười (10) lần so với Tiêu chuẩn tiếp xúc. Ví dụ, chà nhám, khoan, mài, nghiền, quét, brezing, cắt oxy và hàn. Khẩu trang này cũng có thể giúp giảm hơi thở trong các hạt sinh học trong không khí gây bệnh như virus cúm, nhưng không loại trừ nguy cơ nhiễm trùng hoặc bệnh.

### Cảnh báo

- Luôn chắc chắn rằng sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp với ứng dụng, được trang bị chính xác, được đeo trong tất cả các giai đoạn tiếp xúc và được thay thế khi cần thiết.
- Lựa chọn đúng khẩu trang, đào tạo cách sử dụng và sử dụng đúng cách là rất cần thiết để sản phẩm giúp bảo vệ người đeo khẩu trang khỏi một số chất gây ô nhiễm trong không khí. Việc không tuân theo tất cả các hướng hoặc không đeo mặt nạ đúng cách trong tất cả các giai đoạn phơi nhiễm có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người đeo, dẫn đến bệnh nặng hoặc đe dọa tính mạng hoặc thương tật vĩnh viễn.
- Dành cho sự phù hợp và sử dụng đúng cách, tuân thủ các quy định của địa phương, tham khảo tất cả các thông tin được cung cấp hoặc liên hệ với chuyên gia vệ sinh lao động, chuyên gia an toàn hoặc đại diện 3M trên Đường dây trợ giúp công nghệ 3M Australia 1800 024 464, 3M New Zealand 0800364 357.
- Trước khi sử dụng, người đeo phải được huấn luyện sử dụng sản phẩm hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn / hướng dẫn về Sức khỏe và An toàn hiện hành.
- Những sản phẩm này không chứa các thành phần làm từ mùn cao su tự nhiên.
- Những sản phẩm này không bảo vệ chống lại khí / hơi.
- Không sử dụng trong khí quyển chứa ít hơn 19,5% oxy. (Định nghĩa 3M. Cá nhân

các quốc gia có thể áp dụng giới hạn riêng của họ về thiếu oxy.

- Không sử dụng để bảo vệ hô hấp chống lại các chất gây ô nhiễm / nồng độ trong khí quyển không rõ hoặc nguy hiểm ngay lập tức đối với tính mạng và sức khỏe (IDLH).
- **Không sử dụng với tóc trên khuôn mặt hoặc bất cứ điều gì khác có thể ức chế tiếp xúc giữa khuôn mặt và sản phẩm do đó ngăn chặn một con dấu tốt.**
- Khuyến cáo rằng người đeo nên được kiểm tra sự phù hợp theo AS / NZS 1715. Để biết thông tin về quy trình kiểm tra sự phù hợp, vui lòng liên hệ với 3M.
- Kiểm tra Khẩu trang trước mỗi lần sử dụng để đảm bảo nó ở trong tình trạng hoạt động tốt. Kiểm tra tất cả các bộ phận của Khẩu trang để tìm dấu hiệu hư hỏng bao gồm hai dây đai, noseclip, bọt mũi và van. Khẩu trang nên được xử lý ngay khi quan sát thấy hư hỏng hoặc các bộ phận bị thiếu.
- Rời khỏi khu vực bị ô nhiễm ngay lập tức nếu việc thở trở nên khó khăn, hoặc chóng mặt hoặc đau khổ khác xảy ra.
- Vứt bỏ và thay thế Khẩu trang nếu nó bị hỏng, sức cản của hơi thở trở nên quá mức hoặc vào cuối ca.
- Không bao giờ thay đổi, sửa đổi hoặc sửa chữa thiết bị này.
- Trong trường hợp sử dụng dự định trong khí quyển nổ, liên hệ với 3M.
- Nhiệt độ hoạt động tối đa: +50 độ C.
- **THẬN TRỌNG:** Cần cẩn thận khi sử dụng thiết bị ở nhiệt độ thấp vì độ ẩm quá cao có thể khiến các van bị đóng băng.


Các Khẩu trang này đã được sản xuất để tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Úc / New Zealand AS / NAZ1716: 2003 theo chương trình chứng nhận sản xuất đã được thống nhất vận hành trong quá trình sản xuất theo chương trình SAI Global StandardMark™.

## Lưu trữ và vận chuyển

Lưu trữ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, xem bao bì ở phía dưới.

### Production Date on the Primark

Manufacturing Date, as shown is displayed on the label at the top of the box .

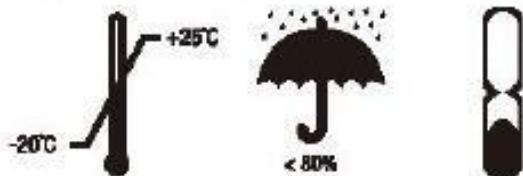

## Ghi chú

Điều kiện trung bình có thể vượt quá 25 ° C / 80% rh trong thời gian giới hạn.

Chúng có thể đạt trung bình 38 ° C / 85% rh, với điều kiện là không quá 3 tháng trong thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Thời hạn sử dụng của sản phẩm chưa mở là 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Trước khi sử dụng ban đầu, luôn kiểm tra xem sản phẩm có trong thời hạn sử dụng đã nêu không.

Khi lưu trữ hoặc vận chuyển sản phẩm này sử dụng bao bì gốc được cung cấp.

## Hướng dẫn lắp

**Phải được theo dõi mỗi lần đeo Khẩu trang.**



1. Khẩu trang trong tay, đầu mũi ở đầu ngón tay và quai treo dưới tay. 2. Khẩu trang dưới cằm, thấp trên mũi.

3. Giữ mặt nạ chắc chắn ở vị trí đặt dây đeo trên cùng và dây đeo phía dưới tai.

4. Dùng cả hai tay, nặn kim loại để tạo hình mũi. Véo mũi bằng một tay có thể làm suy yếu khuôn mặt.

5. KIỂM TRA ÁP LỰC ÁP LỰC. Cup cả hai tay trên Khẩu trang hoàn toàn. Hít mạnh. Nếu không khí rò rỉ xung quanh các cạnh, điều chỉnh đầu mũi và dây đai. Lặp lại kiểm tra phù hợp.

**Điều rất quan trọng là ấn mạnh mũi vào cầu mũi để tạo thành một con dấu tốt. Nếu bạn KHÔNG THỂ đạt được sự phù hợp, KHÔNG vào khu vực nguy hiểm. Xem người giám sát của bạn.**

### Xuất khẩu bởi

Sức khỏe & An toàn 3M Hàn Quốc

Khu B, Khu công nghiệp Jangan Hightech, 577

Geurnui-ri, Jangan-myeon, Hwaseong-si,

Gyeonggi-do, 445-941, Hàn Quốc

Điện thoại: 82-31-359-2114

3M 2011. Bảo lưu mọi quyền.

3M là thương hiệu của Công ty

3M 34-8707 7875-9

Nơi bán khẩu trang 3M n95 8822

tại Việt Nam

Khẩu trang N99

<https://khautrangn99.com>

Địa chỉ: 1 Bàu Cát 1, Phường 14,

Quận Tân Bình